



PHILIPS

DiamondClean

9000



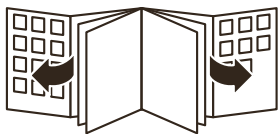

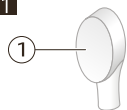1

①

②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧



⑨




⑩

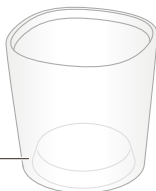


⑪



⑫

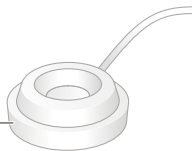

⑬

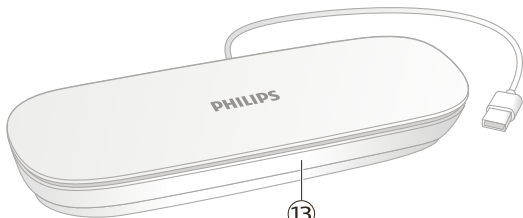

⑭

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení nového elektrického zubního kartáčku Philips Sonicare! Dokonalé odstranění zubního plaku, bělejší zuby a zdravější dásně jsou vám na dosah ruky. Používáním kombinace jemné sonické technologie Sonicare a klinicky vyvinutých a osvědčených funkcí si můžete být jisti, že pokaždé dosáhnete nejlepší čistoty. Další podporu a možnost registrovat produkt získáte na adrese: <http://www.philips.com/welcome>.

Vítejte v rodině Philips Sonicare!

Zamýšlené použití

Elektrické zubní kartáčky řady DiamondClean jsou určeny k odstraňování uchyceného plaku a zbytků potravy ze zubů tak, aby omezily zubní kaz a zlepšovaly a udržovaly zdraví ústní dutiny. Elektrické zubní kartáčky řady DiamondClean jsou určeny pro spotřebitele k domácímu použití. Děti by je měly používat pod dozorem dospělé osoby.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Poznámka: Různé modely se liší příslušenstvím a funkcemi. Některé modely se například dodávají s dezinfekčním zařízením nebo s rozhraním Bluetooth.

Nebezpečí

- Chraňte nabíječku a dezinfekční zařízení před kontaktem s vodou. Neodkládejte ani neskladujte přístroj na místech, ze kterých by mohl spadnout nebo být stažen do vany, umyvadla či dřezu.

- Nabíječku ani dezinfekční zařízení nikdy nesmíte ponořit do vody ani do jiné kapaliny.
- Po čištění zapojte nabíječku a dezinfekční zařízení do zásuvky až po úplném vyschnutí.

Varování

- Přístroj mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození přístroje (hlavy kartáčku, rukojeti kartáčku nebo nabíječky či dezinfekčního zařízení), přestaňte jej používat.
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné vyřadit nabíječku či dezinfekční zařízení z provozu.

- Nabíječku nebo dezinfekční zařízení lze vyměnit pouze za originální typ, aby nevzniklo žádné riziko.
- Tento přístroj neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti. Pokud dojde k jeho poškození, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi (viz 'Záruka a podpora').
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Nepoužívejte nabíječku a dezinfekční zařízení ve venkovním prostoru ani blízko horkých povrchů.

Upozornění

- Hlavici, rukojeť, nabíječku, kryt nabíječky ani dezinfekční zařízení nečistěte v myčce.
- Pokud jste v posledních 2 měsících podstoupili operaci zubu či dásní, poradte se před použitím přístroje se svým zubním lékařem.

- Pokud po použití přístroje dochází k výraznému krvácení nebo pokud krvácení neustává po 1 týdnu používání, obraťte se na svého zubního lékaře. Se zubním lékařem se poradte také v případě, že vám používání tohoto přístroje není příjemné nebo způsobuje bolest.
- Tento přístroj Philips splňuje bezpečnostní standardy pro elektromagnetická zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poradte se před použitím s lékařem nebo s výrobcem implantovaného přístroje.
- Máte-li zdravotní pochybnosti, obraťte se před použitím přístroje na svého lékaře.
- Tento přístroj je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Pokud je vám používání kartáčku nepříjemné nebo způsobuje bolest, ihned přístroj přestaňte používat a obraťte se na svého lékaře.
- Tento přístroj je určen k osobní péči, nikoli pro více pacientů ve stomatologické ordinaci nebo instituci.

- Nepoužívejte jiné hlavice než ty, které jsou doporučeny společností Philips Sonicare.
- Jsou-li vlákna na hlavici kartáčku poškozená nebo ohnutá, přestaňte hlavici používat. Hlavici kartáčku měňte každé 3 měsíce nebo – pokud se objeví známky opotřebení – i častěji.
- Pokud používáte zubní pastu s obsahem peroxidu, jedlé sody nebo bikarbonátu (běžně se vyskytují v bělicích zubních pastách), po každém použití důkladně očistěte hlavici kartáčku mýdlem a vodou. Tím předejdete praskání plastu.
- Produkt nesmí přijít do přímého kontaktu s produkty, které obsahují esenciální oleje nebo kokosový olej. Kontakt může mít za následek uvolnění svazků vláken.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Philips tímto prohlašuje, že elektrické zubní kartáčky s rádiovým rozhraním (Bluetooth) vyhovují požadavkům evropské směrnice 2014/53/EU.

Plné znění prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie je k dispozici na následující webové adrese: **www.philips.com/support**.

Rádiové rozhraní v tomto výrobku pracuje na frekvenci 13,56 MHz.
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený zařízením je 30,16 dBm.

Váš kartáček Philips Sonicare (obr. 1)

- 1 Hygienická cestovní krytka
- 2 Inteligentní hlavice kartáčku*
- 3 Rukojeť
- 4 Vypínač
- 5 Kontrolky intenzity
- 6 Přepínač režimů/intenzity
- 7 Režimy
- 8 Kontrolka připomenutí výměny hlavy kartáčku
- 9 Indikátor baterie
- 10 Nabíjecí sklenice
- 11 Nabíjecí podstavec
- 12 Nabíjecí základna
- 13 (Nabíjecí) cestovní pouzdro*
- 14 Nástěnný adaptér USB*

* Poznámka: Obsah balení se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Aplikace Sonicare – začínáme

Spárováním s aplikací Sonicare získá váš kartáček řadu užitečných funkcí. Po propojení kartáčku s účtem aplikace Sonicare budete moci:

- jednoduše zjistit, jaké děláte pokroky, a dozvědět se, jak si zuby čistit lépe;
- získat tipy a doporučení na míru pro péči o zdraví ústní dutiny.

Chcete-li začít používat aplikaci Sonicare:

- 1 Stáhněte si aplikaci Sonicare do telefonu.
- 2 Otevřete aplikaci a postupujte dle uvedených pokynů.
- 3 Spárujte kartáček s aplikací.
- 4 Vytvořte si účet.
- 5 Budete-li k tomu vyzváni, aktualizujte firmware, abyste získali přístup k nejnovějším vylepšením a funkcím.
- 6 Pravidelně provádějte čištění.

Nyní jste připraveni využívat všechny užitečné funkce. Zuby si čistíte pravidelně. Můžete přijímat aktuální zprávy, které vám pomohou zlepšovat péči o ústní dutinu.

Poznámka: Ujistěte se, že je na vašem telefonu během používání aplikace aktivována funkce Bluetooth. Kartáček využívá připojení Bluetooth pro přenos údajů o čištění zubů do aplikace. Pokud máte dotazy ohledně toho, proč jsou shromažďovány údaje o čištění, projděte si Prohlášení o ochraně soukromí Sonicare, které je dostupné při úvodním nastavování aplikace.

Aplikace Sonicare – sledujte a zlepšujte péči o svou ústní dutinu

Zubní kartáček Sonicare je vybaven inteligentními senzory, které vám poskytnou zpětnou vazbu o vašich zvyklostech čištění včetně:

- denního čištění,
- doby strávené při jednotlivých čištěních,
- přítlaku při čištění,
- připomenutí výměny hlavice kartáčku (podle skutečného používání).

Aplikace Sonicare shromažďuje data poskytnutá inteligentními snímači a průběžně sleduje vaše návyky čištění.

Každá z funkcí dostupných v aplikaci je navržena tak, aby vám pomohla porozumět vašim návykům při čištění a aby vám poskytla jednoduchá doporučení pro zlepšení a udržení zdraví ústní dutiny. Informace o čištění uzpůsobeném na míru získáte v aplikaci Sonicare.

Hlavy kartáčků

Chcete-li zjistit, jaký typ hlavice kartáčku máte, podívejte se na štítek ve spodní části hlavice kartáčku. Symbol ve spodní části hlavice kartáčku indikuje, že se jedná o inteligentní hlavu kartáčku, která je vybavena technologií BrushSync.

Poznámka: Obsah balení se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.




Název hlavice kartáčku	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
Štítek hlavice kartáčku	C3	W3	G3
Výhoda	Odstraňování plaku	Odstraňování plaku a skvrn	Zdravější dásně

Chcete-li prozkoumat celou naši řadu hlavic kartáčku, navštivte stránky www.philips.com/toothbrush-heads, kde naleznete více informací.

Použití kartáčku Philips Sonicare

Pokyny k čištění zubů

- 1 Pevně zatlačte hlavici kartáčku na rukojeť. Navlhčete vlákna a naneste na ně zubní pastu.

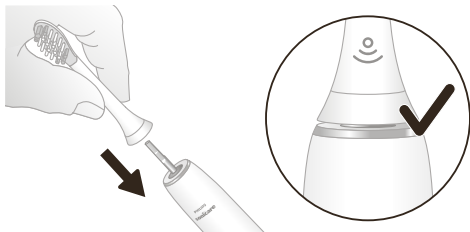


Poznámka: Malá mezera patrná mezi hlavou kartáčku a rukojetí je normální. Umožňuje totiž správné vibrování hlavice kartáčku.


- 2 Přiložte štětiny kartáčku k zubům pod mírným úhlem (45 stupňů) a lehce přitlačte. Štětiny se díky tomu dostanou k okraji dásní, nebo mírně pod něj.

Poznámka: Udržujte střed hlavice kartáčku ve stálém kontaktu se zuby.

- 3 Zapněte kartáček Philips Sonicare stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.

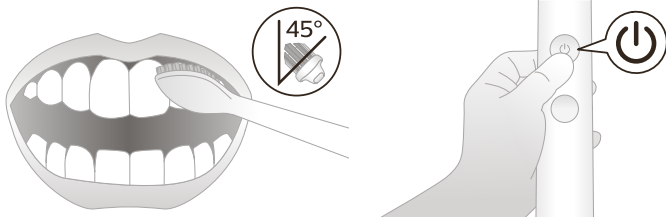


- 4 Abyste dosáhli maximální účinnosti kartáčku Philips Sonicare, mírně na něj tlačte a nechte jej, aby zuby čistil za vás. Jemně pohybuje hlavici kartáčku po zubech krátkými pohyby sem a tam, aby se delší štětiny dostaly mezi zuby. Tímto pohybem pokračujte po celý cyklus čištění.

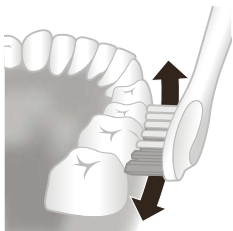

Poznámka: K dispozici (viz 'Režimy čištění') jsou různé režimy.

- 5 Chcete-li vyčistit vnitřní plochu předních zubů, nakloňte rukojet kartáčku napůl svisle a na každém zubu proveďte několik svislých překrývajících se tahů kartáčkem.

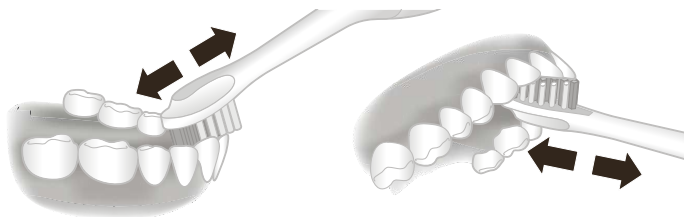

Poznámka:

- Změna vibrací v rukojeti vás při čištění upozorní, že vyvíjíte přílišný tlak (viz 'Snímač tlaku').
- Zubní kartáček Philips Sonicare můžete bezpečně používat na zubní rovnátka, zubní úpravy i zubní náhrady (výplně, korunky, fazety)
- Elektrický zubní kartáček nepoužívejte ve sprše.

Technologie BrushSync

Technologie BrushSync umožňuje hlavičce kartáčku prostřednictvím mikročipu komunikovat s rukojetí. Symbol ve spodní části hlavičky kartáčku indikuje, že je vybavena technologií BrushSync. To umožňuje následující funkce:


- Párování režimu hlavy kartáčku
- Připomenutí výměny hlavy kartáčku

Režimy čištění

Elektrický zubní kartáček je vybaven 4 různými režimy: clean, white+, gum health a deep clean+.

Optimální režim a intenzitu vybere technologie BrushSync automaticky v závislosti na typu nasazené inteligentní hlavičky kartáčku.

Chcete-li režim manuálně změnit, stiskněte přepínač režimů/intenzity, když je kartáček vypnutý a hlavička je nasazena.

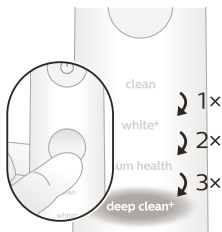

*** Poznámka:**

- Všechny hlavice kartáčku fungují v každém z režimů.
- Při použití zubního kartáčku Philips Sonicare v klinických studiích byl kartáček používán s vysokou intenzitou a funkce EasyStart přitom byla vypnutá.

Párování režimu hlavy kartáčku

Hlavice kartáčku s technologií BrushSync jsou vybaveny mikročipem, který komunikuje s rukojetí a automaticky ji páruje s doporučeným režimem a intenzitou.

Poznámka: Při změně režimů/intenzity si hlavice kartáčku zapamatuje poslední uložené nastavení. Pokud si přejete čistit zuby s doporučeným nastavením, najdete doporučený režim/intenzitu v části „Režimy čištění“.

Párování režimu hlavy kartáčku

Hlavice kartáčku s technologií BrushSync jsou vybaveny mikročipem, který komunikuje s rukojetí a automaticky ji páruje s doporučeným režimem a intenzitou.

Poznámka: Při změně režimů/intenzity si hlavice kartáčku zapamatuje poslední uložené nastavení. Pokud si přejete čistit zuby s doporučeným nastavením, najdete doporučený režim/intenzitu v níže uvedené tabulce.

	clean (čištění) a deep clean+ (hluboké čištění+)	white+ (bělení+)	gum health (zdraví dásní)
Výhoda	Odstraňování plaku	Odstraňování plaku a povrchových skvrn	Odstraňování plaku a masáž dásní
Doporučená hlavice kartáčku	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)
Doporučená úroveň intenzity	3	3	3
Celková doba čištění	clean (čištění): 2 minut deep clean+ (hluboké čištění+): 3 minut*	2 minuty a 40 sekund	3 minuty a 20 sekund


**clean (čištění) a
deep clean+
(hluboké
čištění+)**

**white+
(bělení+)**


**gum health
(zdraví dásní)**

Jak čistit


clean (čištění):
Každý úsek
čistěte
20 sekund.

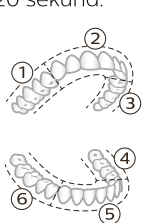


Každý úsek
čistěte
20 sekund,

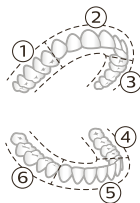

Každý úsek
čistěte
20 sekund,

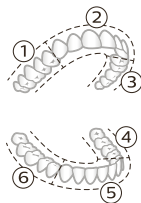


deep clean+
(hluboké
čištění+): Každý
úsek čistěte
30 sekund*

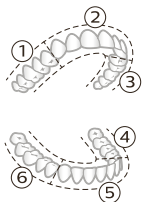

poté čistěte
každý z úseků 7
a 8 po dobu
20 sekund.



poté čistěte
každý z úseků
7, 8, 9 a 10 po
dobu
20 sekund.

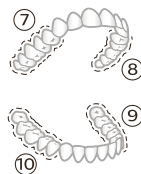

* Poznámka: Při čištění v režimu „deep clean+“ v aplikaci Sonicare trvá čištění 2 minuty.

Nastavení intenzity


Elektrický zubní kartáček umožňuje nastavit 3 různé režimy intenzity:

- nízká intenzita (jedna čárka)

- střední intenzita (dvě čárky)
- vysoká intenzita (tři čárky)

Při nasazení na rukojeť zvolí inteligentní hlavice doporučenou intenzitu automaticky. Chcete-li intenzitu manuálně změnit, zapněte rukojeť a stiskněte tlačítko režimů/intenzity.

Chcete-li změnit nastavení intenzity, stiskněte toto tlačítko, když je kartáček zapnutý.

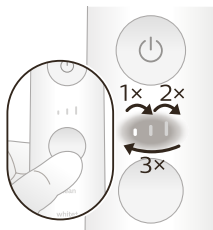

Funkce

- Tempovač kartáčku
- Snímač tlaku
- Připomenutí výměny hlavy kartáčku
- EasyStart

Tempovač kartáčku

Funkce BrushPacer vás prostřednictvím krátké změny vibrací upozorní, kdy je čas přejít na další úsek zubů.

Na konci cyklu čištění se zubní kartáček automaticky vypne.

Snímač tlaku

Z důvodu ochrany dásní a zubů před poškozením kartáčků Philips Sonicare měří tlak vyvíjený při čištění zubů.

Pokud vyvíjíte přílišný tlak, rukojeť změní vibrace, dokud tlak nesnížíte.

Poznámka: Produkt se dodává s aktivovaným senzorem tlaku. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte na část „Aktivace nebo deaktivace funkcí“.

Připomenutí výměny hlavy kartáčku

Rukojeť bude průběžně sledovat opotřebení hlavice kartáčku měřením:

- celkového tlaku vyvinutého při čištění,
- celkového času čištění hlavicí kartáčku.

Jakmile již není hlavice kartáčku účinná, bude žlutě blikat upozornění na výměnu hlavice kartáčku a rukojeť bude slyšitelně pípat.



Poznámka: Produkt se dodává s aktivovanou funkcí připomenutí výměny hlavic kartáčku. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte na část „Aktivace nebo deaktivace funkcí“.

EasyStart

Funkce EasyStart jemně zvyšuje výkon rukojeti během prvních 14 čištění, abyste si zvykli na intenzitu čištění s kartáčkem Philips Sonicare.


Funkce EasyStart funguje ve všech režimech.

Poznámka: Produkt se dodává s deaktivovanou funkcí EasyStart. Chcete-li aktivovat funkci EasyStart, přejděte na část „Aktivace nebo deaktivace funkcí“.


Nabíjení a stav baterie

Nabíjení v nabíjecí základně

- 1 Zapojte kabel nabíjecí základny do elektrické zásuvky.
- 2 Položte nabíjecí stojan nebo nabíjecí sklenici na nabíjecí základnu.

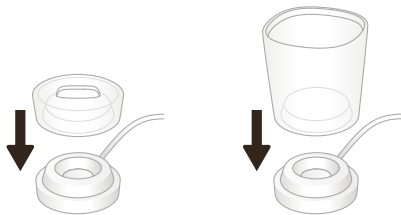

3 Umístěte rukojeť na nabíjecí stojan nebo do nabíjecí sklenice.

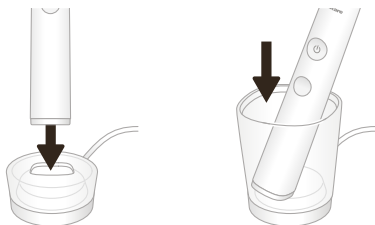

4 Nabíječka bude nabíjet kartáček až do úplného nabití.

Pokud ukazatel stavu baterie bliká bíle, rukojeť se nabíjí. Když je rukojeť plně nabitá, indikátor stavu baterie svítí bíle po dobu 30 sekund a potom zhasne.

Poznámka: Rukojeť se dodává předem nabitá pro první použití. Po prvním použití přístroj nabíjejte alespoň 24 hodin.

Nabíjení cestovním pouzdem*

* Poznámka: V závislosti na zakoupeném modelu nemusí být cestovní pouzdro součástí dodávky.

- 1** Vyjměte USB kabel z dolní části nabíjecího cestovního pouzdra.
- 2** Připojte nabíjecí cestovní pouzdro ke zdroji stejnosměrného napětí 5 V z:
 - poskytnutého USB adaptéru,
 - standardního počítačového USB konektoru standardizovaného UL nebo certifikovaného dle normy ANSI/UL 60950-1, nebo

- napájecího zdroje LPS s výstupním USB portem standardizovaného UL nebo certifikovaného dle normy ANSI/UL 60950-1,
- napájecího zdroje standardizovaného UL nebo certifikovaného dle normy 1310 třídy 2.

Důležité: Nástěnný adaptér musí být naprosto bezpečný zdroj velmi nízkého napětí kompatibilní se specifikacemi uvedenými na spodní straně zařízení.

3 Cestovní pouzdro nabije váš kartáček až do úplného nabití.

Stav baterie (rukojeť připojená k nabíječce)

Při zapojení rukojeti do nabíječky nebo cestovního pouzdra se na indikátoru stavu baterie zobrazí aktuální úroveň nabití.

Stav baterie	Indikátor baterie
Nabíjení	Bliká bíle
Plně nabitá	Svítil bíle po dobu 30 sekund a potom zhasne.

Stav baterie (když rukojeť není v nabíječce)

Při zapnutí rukojeti kartáčku bude kontrolka baterie na spodní části rukojeti zobrazovat stav baterie.

Stav baterie	Indikátor baterie	Zvukový signál
Plně nabitá	Svítil bíle	-
Částečně nabitá	Bliká bíle	-
Nízká	Bliká žlutě	Rukojeť třikrát pípne
Vybitá	Bliká žlutě	Rukojeť pětkrát pípne dvakrát po sobě

Aktivace nebo deaktivace funkcí

Následující funkce zubního kartáčku můžete aktivovat nebo deaktivovat:

- EasyStart
- Připomenutí výměny hlavy kartáčku
- Snímač tlaku

Krok 1: Umístěte rukojeť na nabíjecí stojan nebo do nabíjecí sklenice.



Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko vypnutí/zapnutí pro:

Snadné
spuštění

Připomenutí
výměny hlavy
kartáčku

Snímač tlaku

3 sekundy

Až 5 sekund

Až 7 sekund



Krok 3: Pustte tlačítko vypnutí/zapnutí, až uslyšíte

1 pípnutí

1 pípnutí
a poté
2 pípnutí

1 pípnutí, 2 pípnutí
a poté 3 pípnutí



Pokud indikátor nabití baterie dvakrát bíle blikne a uslyšíte trojici tónů od nízkého po vysoký, pak byla funkce aktivována.

NEBO




Pokud indikátor nabití baterie jednou bíle blikne a ozve se trojice tónů od nízkého po vysoký, pak byla funkce deaktivována.

Čištění


- Všechny součásti lze očistit navlhčeným hadříkem nebo umýt teplou vodou.




- Z přístroje vyjměte hlavici kartáčku a důkladně ji opláchněte.

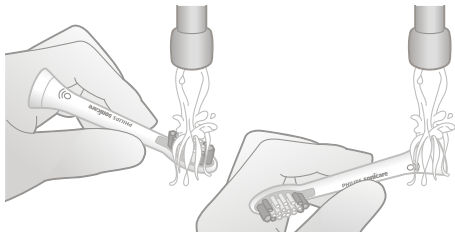

- Alespoň jednou za týden omyjte celou rukojeť s důrazem na oblast připojení hlavice kartáčku.

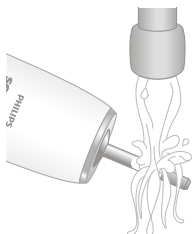

Upozornění: Neposouvejte gumové těsnění na horní straně rukojeti. Okolí gumového těsnění jemně očistěte.

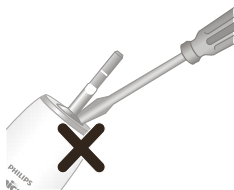

Upozornění:

- Hlavici kartáčku, cestovní krytku, rukojeť, nabíječku ani cestovní pouzdro nemyjte v myčce.
- K čištění rukojeti nepoužívejte izopropylalkohol, ocet, bělidlo ani žádný jiný přípravek na úklid domácnosti, mohlo by dojít ke změně barvy.
- Před čištěním nabíječku odpojte ze sítě.
- Nečistěte hlavice kartáčku esenciálními oleji, mohlo by dojít k jejich poškození.

Skladování

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej z elektrické zásuvky, očistěte jej a uložte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečních paprsků.

Nejčastější dotazy

Otázka	Odpověď
Mohu kartáček Sonicare nechat mezi čištěními na nabíječce?	Ano, kartáček Philips Sonicare můžete nechat neustále zapojený na nabíječce. Životnost baterie to nijak neovlivní.
Budou na kartáček Philips Sonicare pasovat i ostatní hlavice kartáčku?	Všechny hlavice pro elektrický kartáček Philips Sonicare, které lze nasadit, pasují na kartáček. Ne všechny jsou však vybaveny technologií BrushSync. Hlavice kartáčku s technologií BrushSync můžete poznat pomocí ikony ve spodní části hlavice kartáčku.
Jak často je potřeba vyměnit hlavici kartáčku?	Hlavici kartáčku Philips Sonicare doporučujeme vyměnit po 3 měsících používání (údaj odpovídá čištění dvakrát denně při době jednoho cyklu čištění 2 minuty). Ohledně nutnosti výměny hlavice kartáčku vás bude informovat upozornění na výměnu hlavice kartáčku.
Je kartáček Philips Sonicare voděodolný?	Ano, kartáček Philips Sonicare je voděodolný. Nikdy ale nečistěte rukojeť mytím v myčce. A nepoužívejte jej ve sprše.
Jaké telefony jsou kompatibilní s aplikací Philips Sonicare?	Aplikace Philips Sonicare podporuje operační systémy Android a Apple iOS. Nejnovější verzi aplikace Philips Sonicare naleznete v obchodech Android Play Store nebo Apple App Store. Mobilní zařízení musí být vybavena připojením Bluetooth verze 4.0 nebo novější.

Otázka

Odpověď

Jaké další kartáčky Philips Sonicare mohou použít s aplikací Philips Sonicare?

S aplikací Sonicare můžete používat pouze kartáčky Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000 a ExpertClean. Hledejte symbol Bluetooth na přední straně balení.

Recyklace



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor, který nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem (2006/66/ES). Odneste prosím výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska společnosti Philips a požádejte tamního odborníka o vyjmutí nabíjecí baterie.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výměna nabíjecí baterie na konci životnosti

Varování

- Nabíjecí baterii vyjměte pouze v případě, že budete rukojeť likvidovat.
- Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je úplně prázdný.
- Jakýkoli pokus o vyjmutí baterie znamená ztrátu záruky.

Více informací naleznete na adrese www.philips.com/support nebo na bezplatné telefonní lince 1-800-243-3050.

Vyjmutí dobíjecího akumulátoru


Varování: Až budete přístroj likvidovat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je úplně prázdný.

Chcete-li vyjmout nabíjecí baterii, potřebujete ručník nebo utěrku, kladívko a plochý (obyčejný) šroubovák. Při provádění níže popsaného postupu dodržujte základní bezpečnostní opatření. Chraňte si oči, ruce, prsty a povrch, na kterém pracujete.

- 1 Chcete-li dobíjecí baterii zcela vybit, vyjměte rukojeť z nabíječky, zapněte kartáček Philips Sonicare a nechte jej pracovat, dokud se nezastaví. Tento krok opakujte, dokud již není možné kartáček Philips Sonicare zapnout.




- 2 Sejměte a vyhodte hlavici kartáčku. Přikryjte celou rukojeť ručníkem nebo hadříkem.

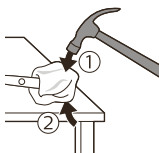


- 3** Podržte horní část rukojeti jednou rukou a klepněte na kryt rukojeti 1 cm nad dolní částí. Klepněte silně kladívkem na všechny 4 strany, čímž otevřete kryt konce.


Poznámka: Možná budete muset udeřit několikrát, abyste rozlomili vnitřní spojovací díly.

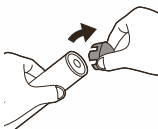


- 4** Demontujte kryt konce z rukojeti kartáčku. Pokud nedejde ke snadnému uvolnění krytu konce, opakujte krok 3, dokud není kryt konce uvolněn.

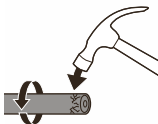


- 5** Držte rukojeť dnem vzhůru a zatlačte hřebíčkem proti tvrdému povrchu. Pokud nedejde ke snadnému uvolnění vnitřních součástí z krytu, opakujte krok 3, dokud nebudou vnitřní součásti uvolněny.

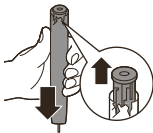

- 6** Vklíňte šroubovák mezi baterii a černý kryt na spodní straně vnitřních součástí. Poté páčením šroubováku od baterie zlomte spodní část černého rámu.

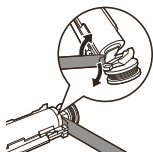


- 7 Vložením šroubováku mezi spodní část baterie a černý rámeček dojde ke zlomení kovového jazýčku připojení baterie k zelené desce s plošnými spoji. Tím dojde k uvolnění spodního konce baterie z rámu.

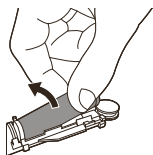

- 8 Uchopte baterii a vytáhněte ji z vnitřních součástí. Zlomíte tak druhý kovový jazýček baterie.

Upozornění: Dávejte pozor na ostré hrany jazýčků baterie, aby nedošlo k poranění prstů.

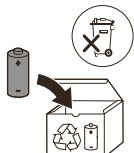

- 9 Zalepte kontakty baterie páskou, čímž zabráníte vzniku elektrického výboje ze zbytkového nabití baterie. Dobíjecí baterii nyní lze recyklovat a zbytek výrobku náležitě zlikvidovat.

Poznámka: Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.


Záruka a podpora

Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web **www.philips.com/support** nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností.

Omezení záruky

Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující:

- hlavy kartáčků,
- poškození způsobené neoprávněnou výměnou součástí,
- poškození způsobené nesprávným použitím, úmyslné poškození, nedostatečná péče, úpravy nebo neoprávněné opravy,
- běžné opotřebení, například odštipnutí, škrábance, oděrky, odbarvení nebo vyblednutí.

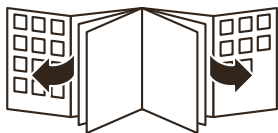

www.philips.com/Sonicare

©2019 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

3000,056.1926.1 (26/6/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé