


Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

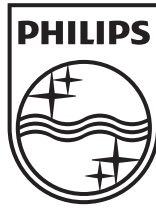


Philips Sonicare DiamondClean 300 SERIES

www.philips.com/Sonicare

©2012 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). All rights reserved.
PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPENV.
DiamondClean, Easy-start, Quadpacer, Sonicare and the Sonicare logo
are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV.

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending.
Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

 100% recycled paper
100% papier recyclé
4235.020.6064.1

PHILIPS

1	Úvod.....	33
2	Obsah balení (Obr: 1).....	33
3	Důležité.....	34
4	Nabíjení kartáčku Sonicare.....	36
5	Používání kartáčku Sonicare	37
6	Zvykání na používání kartáčku Sonicare	39
7	Cestování s kartáčkem Sonicare	40
8	Čištění kartáčku Sonicare	41
9	Skladování kartáčku Sonicare	42
10	likvidace	43
11	Záruka a servis.....	44

11 ZÁRUKA A SERVIS



www.philips.com/support

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Telefonní číslo na střediska najdete na záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Omezení záruky


Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující:

- Náhradní kartáčky
- Poškození způsobené nesprávným použitím, úmyslné poškození, zanedbání, změny nebo neoprávněné opravy.
- Obvyklé opotřebení, například našťípnutí, poškrábání, odření, odbarvení nebo vyblednutí.

1 ÚVOD

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome, kde získáte podporu.

2 OBSAH BALENÍ (OBR. 1)

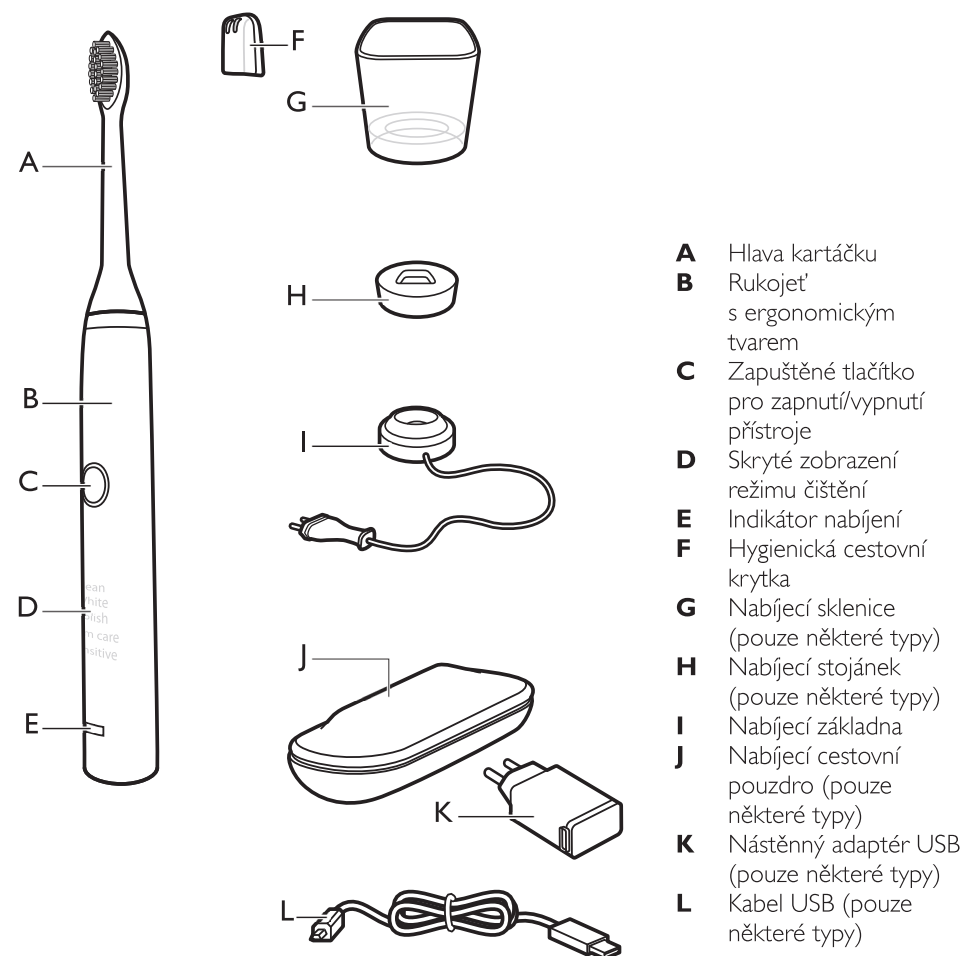

3 DŮLEŽITÉ

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

NEBEZPEČÍ

- Zapojenou nabíjecí základnu udržujte mimo dosah vody. Neumist'ujte nabíjecí základnu nad vodu nebo blízko vody ve vaně, umyvadle apod., ani ji tam neukládejte. Neponořujte nabíjecí základnu ani nabíjecí cestovní pouzdro do vody ani do žádné jiné kapaliny. Po čištění se před zapojením nabíjecí základny nebo nabíjecího cestovního pouzdra do zásuvky ujistěte, zda jsou úplně suché.

VAROVÁNÍ

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Nabíjecí základnu ani nabíjecí cestovní pouzdro nikdy nepoužívejte v případě, že jsou jakkoli poškozeny. Pokud je poškozena nabíjecí základna, nabíjecí cestovní pouzdro, kabel nebo zástrčka, vždy je nechte vyměnit za originální typ, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Pokud je přístroj jakkoli poškozen (na hlavě kartáčku, rukojeti zubního kartáčku), přestaňte jej používat. Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, jejichž výměnu či opravu by mohl provádět uživatel. Pokud dojde k poškození přístroje, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi (viz kapitola „Záruka a servis“).
- Nabíjecí základnu ani nabíjecí cestovní pouzdro nepoužívejte v exteriéru nebo v blízkosti zahřátých povrchů.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.


10 LIKVIDACE

Upozorňujeme vás, že tento postup je nevratný.

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Nabíjecí baterii vždy předejte k likvidaci na oficiálním sběrném místě pro baterie. Pomůžete tím chránit životní prostředí.


Nabíjecí baterii vyjměte teprve na konci životnosti výrobku. Pokud tak učiníte dříve, bude výrobek zničen. Dodržujte základní bezpečnostní opatření.

Vyjmutí nabíjecí baterie z rukojeti: Položte rukojeť na pevný povrch a kladívkem lehce klepněte na kryt přibližně 2,5 cm od dolního okraje. Otočte rukojeť o 90 stupňů a opakujte postup, dokud se od rukojeti neoddělí dolní víčko.

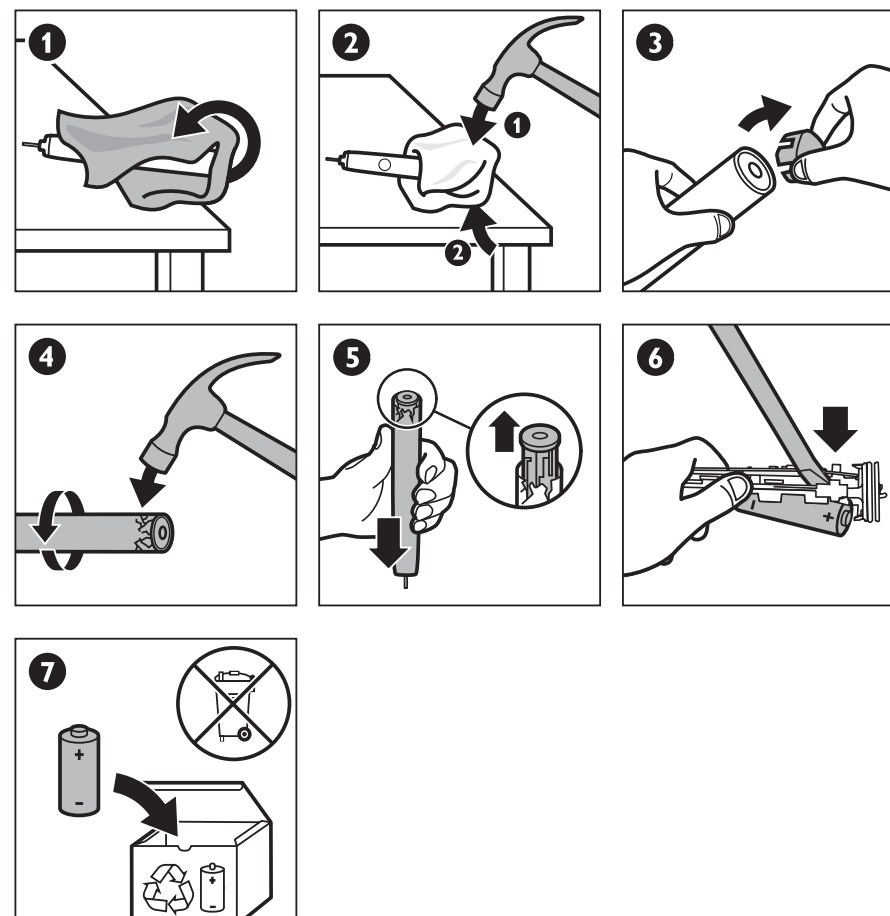

SKLADOVÁNÍ KARTÁČKU SONICARE

Skladování – pokud kartáček Sonicare nebudete po delší dobu používat, odpojte nabíjecí základnu, vyčistěte všechny součásti a uložte je na chladné, suché místo mimo dosah přímého slunečního světla.

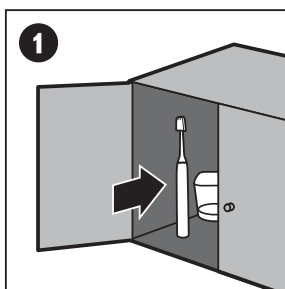

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte zubní kartáček ve vaně ani ve sprše.
- Pokud jste v posledních 2 měsících podstoupili operaci zubu či dásní, poraďte se před použitím zubního kartáčku se svým zubním lékařem.
- Pokud po použití kartáčku dochází k výraznému krvácení nebo pokud krvácení neustává po 1 týdnu používání, obraťte se na svého zubního lékaře.
- Zubní kartáček Sonicare splňuje bezpečnostní standardy pro elektromagnetická zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, před použitím kartáčku Sonicare se poraďte s lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení.
- Tento přístroj je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům. Pokud je vám používání nepříjemné nebo máte pocity bolesti, ihned přístroj přestaňte používat a obraťte se na svého lékaře.
- Máte-li zdravotní pochybnosti, obraťte se před použitím přístroje Sonicare na svého lékaře.
- Zubní kartáček Sonicare je přístroj určený k osobní péči a není určen pro použití u více pacientů ve stomatologické ordinaci nebo instituci.
- Jsou-li štětinky na hlavě kartáčku poškozené nebo ohnuté, přestaňte hlavu kartáčku používat. Hlavu kartáčku vyměňte každé 3 měsíce nebo dříve, pokud vykazuje známky opotřebení.
- Hlavu kartáčku nemyjte v myčce nádobí.
- Nepoužívejte jiné hlavy kartáčku než ty, které jsou doporučeny výrobcem.
- Dohlížejte na děti během čištění zubů, dokud si neosvojí správné návyky čištění.
- Pokud používáte zubní pastu s obsahem peroxidu, jedlé sody nebo bikarbonátu (běžně se vyskytují v bělicích zubních pastách), po každém použití důkladně očistěte hlavu kartáčku mýdlem a vodou. Tím předejdete praskání plasty.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

4 NABÍJENÍ KARTÁČKU SONICARE

Před prvním použitím nabíjejte kartáček po dobu 24 hodin. Indikátor nabití bude zeleně blikat, dokud nebude kartáček Sonicare zcela nabitý. Rychlé žluté blikání dává najevo, že je baterie téměř vybitá (zbývají méně než 3 použití).


Zubní kartáček Sonicare je navržen tak, aby na jedno nabití vydržel pravidelně pracovat až 3 týdny.

Další způsoby nabíjení jsou popsány v kapitole „Cestování s kartáčkem Sonicare“.

Nabíjecí sklenice je určena pro důkladné nabití pouze jedné rukojeti současně.


Nepokládejte do sklenice nabíječky kovové předměty. Mohly by ovlivnit proces nabíjení a způsobit přehřátí nabíjecí základny.

Tato nabíjecí základna není kompatibilní s předchozími modely kartáčku Sonicare.

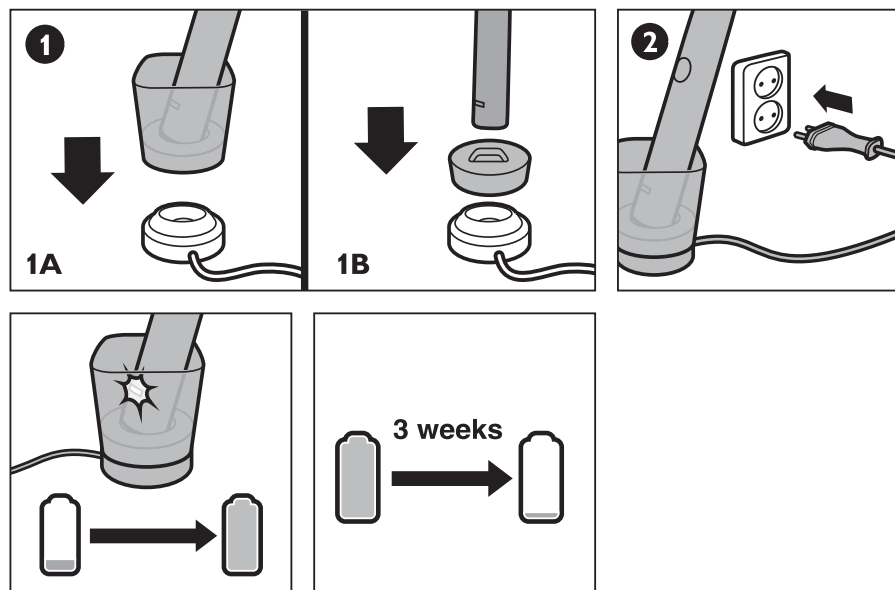

8 ČIŠTĚNÍ KARTÁČKU SONICARE


Čištění – Kartáček Sonicare pravidelně čistěte. Opláchněte rukojeť a hlavu kartáčku. V případě potřeby otřete všechny povrchy měkkým hadříkem s jemným mýdlem. K čištění nepoužívejte ostré předměty. V myčce nádobí lze mýt pouze nabíjecí sklenici, a to v horním koši. Hlavu kartáčku, rukojeť, nabíjecí základnu ani nabíjecí cestovní pouzdro v myčce nádobí nemyjte.

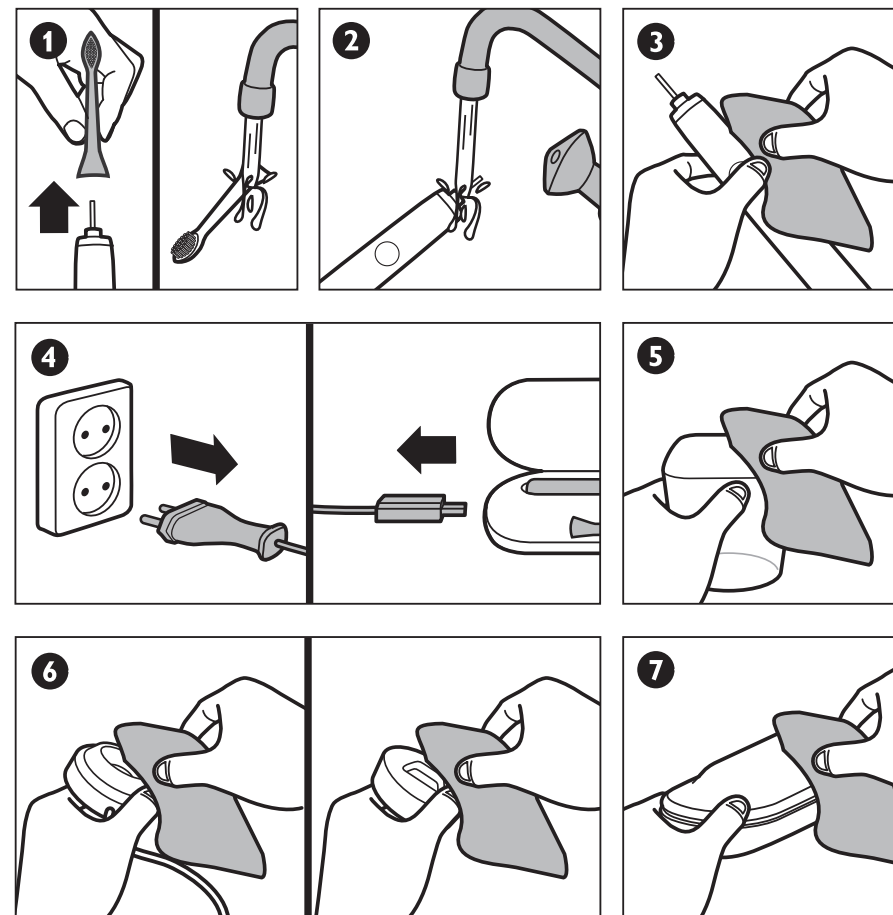

7 CESTOVÁNÍ S KARTÁČKEM SONICARE

Nabíjení prostřednictvím elektrické zásuvky – Vložte rukojeť do nabíjecího cestovního pouzdra, zapojte kabel USB do nástěnného adaptéru USB a zapojte nástěnný adaptér USB do elektrické zásuvky. Indikátor nabíjení na rukojeti bliká zeleně, dokud se rukojeť zcela nenabije.

Nabíjení prostřednictvím rozhraní USB – Vytáhněte kabel USB z nástěnného adaptéru USB a zasuňte zástrčku USB do jakéhokoli portu USB. Používejte pouze dodaný nástěnný adaptér USB a kabel USB.

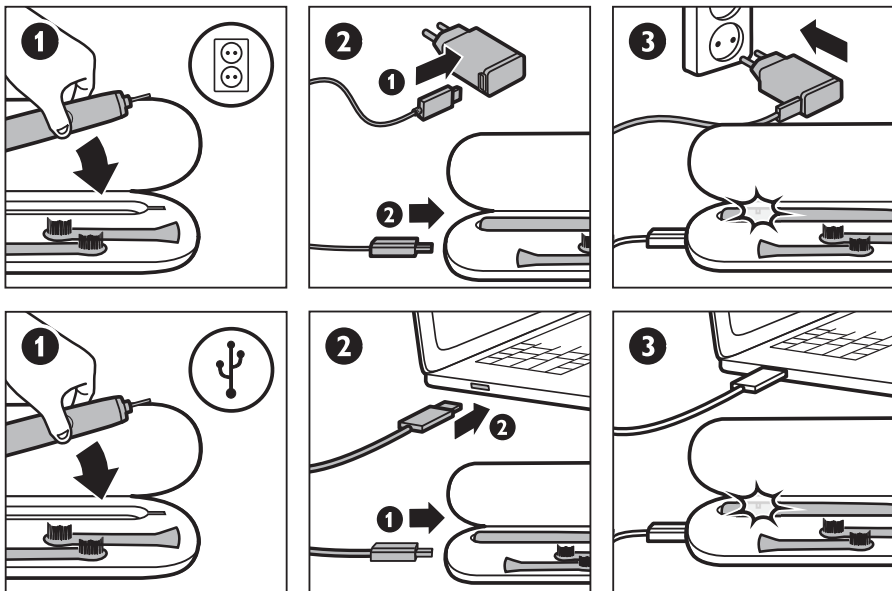

5 POUŽÍVÁNÍ KARTÁČKU SONICARE

Čištění – Pohybujte hlavou kartáčku pomalu a jemně po zubech krátkými pohyby sem a tam, aby se delší štětiny dostaly mezi zuby. Nečistěte zuby stejně jako obyčejným kartáčkem. Abyste dosáhli maximální účinnosti kartáčku Sonicare, mírně na něj tlače a nechte jej, aby zuby čistil za vás.

Funkce Quadpacer je intervalový časovač, který vydává zvukový signál a krátce pozastaví činnost na znamení, že byste měli čistit 4 části ústní dutiny. V závislosti na zvoleném režimu čištění vydává funkce Quadpacer zvukové signály v různých intervalech cyklu čištění.


Čištění – Dokonalé pro odstranění zubního kamene (standardní režim).

Bílá – Režim bělení po dobu 2 minut slouží k odstranění povrchových skvrn. Poté se po dobu 30 sekund projasňují a leští přední zuby.

Leštění – Rychlý režim v trvání 1 minuty, který projasňuje a leští přední zuby.

Péče o dásně – Kompletní režim. Spojuje režim čištění a další minutu jemné stimulace a masírování dásní, které zlepšují zdraví vašich dásní.

Citlivá péče – Zvláště jemný režim pro citlivé zuby a dásně.

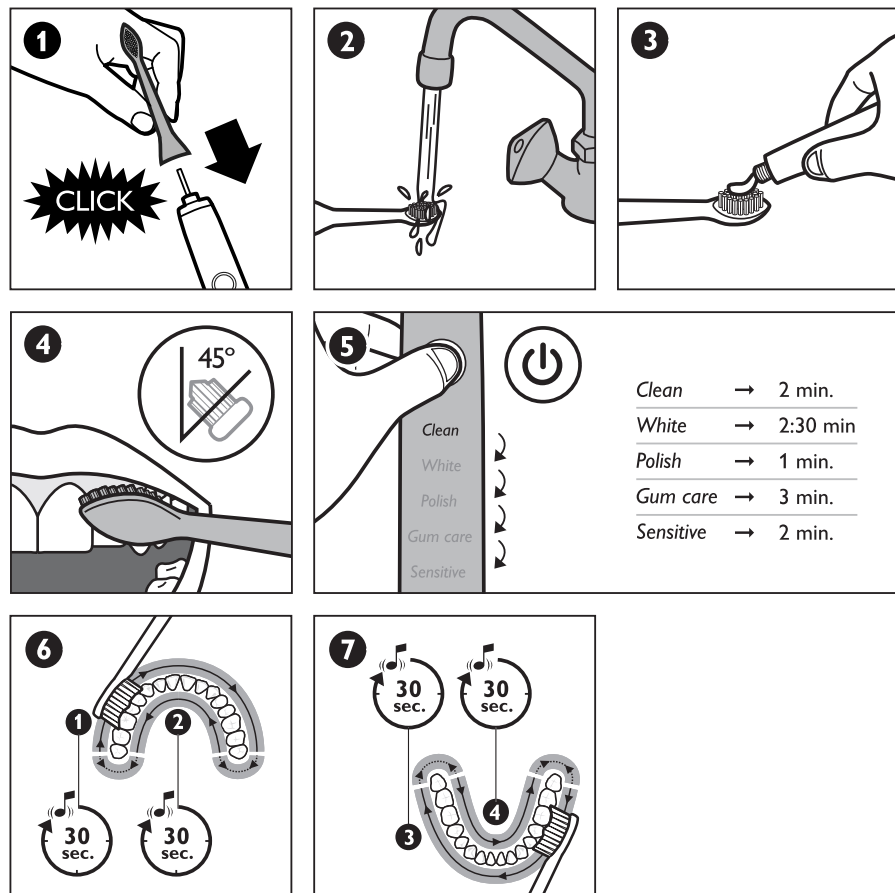

6 ZVYKÁNÍ NA POUŽÍVÁNÍ KARTÁČKU SONICARE

Funkce pro snadný začátek - Při prvním použití možná budete mít pocit, že kartáček Sonicare lechtá. Abyste si lépe zvykli na používání kartáčku Sonicare, funkce pro snadný začátek postupně zvyšuje sonický výkon během prvních 14 čištění. Čištění musí trvat alespoň 1 minutu, aby se cyklus počátečního zvykání posouval dále.

Funkci pro snadný začátek lze deaktivovat – Vložte rukojeť do zapojené nabíjecí základny nebo nabíjecího cestovního pouzdra – Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje po dobu 2 sekund; 1 zvukový signál oznamuje, že byla funkce pro snadný začátek deaktivována; 2 zvukové signály oznamují, že byla tato funkce znovu aktivována. Klinické studie je nutno provádět s plně nabitým kartáčkem Sonicare a s deaktivovanou funkcí pro snadný začátek.

